

D **Gebruuchsanweisung**
Steriles nicht-resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial
Nadel-Faden-Kombination aus Seide

F **Mode d’emploi**
Matériel de suture chirurgical stérile non-résorbable
Combinaison aiguille-fil en soi

GB **Instructions for use**
Sterile, non-absorbable surgical suture material
Needle-suture combination made of silk

H **Használati utasítás**
Steril nem felszívódó sebészeti varróranyag
Tű-fonal kombináció selyemből

I **Guida all’uso**
Materiale di sutura chirurgico sterile non riassorbibile
Combinazione ago-filo in seta

D **Gebruuchsanweisung**
Steriles nicht-resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial
Nadel-Faden-Kombination aus Seide

1. BESCHREIBUNG

SABAsilk® ist ein nicht-resorbierbares steriles geflochtenes chirurgisches Nahtmaterial, das aus dem organischen Protei­n­Fibroin besteht, welches aus dem Kokon der Seiden­spinnerraupe gewonnen wird. Diese feinsten Kokonfäden werden gereinigt, versponnen und präzisionsgeflochten. Dieses Nahtmaterial kann zur Verbesserung der Handhabungs­eigenschaften sowie zur Verminderung der Kapillarität beschichtet ein. Es zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und gute Reißfestigkeit aus. SABAsilk® Nahtmaterial ist in Weiß ohne Farbstoff oder mit physiologisch unbedenklichem Farbstoff schwarz oder blau eingefärbt lieferbar. Es ist in verschiedenen Fadenstärken und -längen mit fest armierten chirurgischen Nadeln unterschiedlicher Typen und Durchmesser erhältlich. Die Verpackung von SABAsilk® ist hellblau gekennzeichnet. SABAsilk® erfüllt die strengen Anforderungen des Europäischen Arzneimittelbuchs und der EG-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

2. ANWENDUNGSGEBIETE

SABAsilk® ist vorgesehen für die Adaptation von Wundrändern und/oder Ligatur.

Anwendung

Das zu verwendende Nahtmaterial ist unter Berücksichtigung des Zustands des Patienten und der Größe der Wunde auszuwählen.

Materialverhalten

Nahtmaterial aus Seide löst eine anfängliche minimale entzündliche Gewebereaktion aus, worauf eine schrittweise Umschließung durch faseriges Bindegewebe eintritt. Obwohl das Seide nicht resorbiert wird, kann ihre fortschreitende Degradation der proteinösen Seidenfasern in vivo zu einer allmählichen Abnahme der Reißfestigkeit führen.

3. GEGENANZEIGEN

SABAsilk® ist nicht bestimmt für Anwendung am Herz, am zentralen Kreislaufsystem oder am zentralen Nervensystem. Es sollte nicht eingesetzt werden, wenn eine Erhaltung der Reißfestigkeit des Nahtmaterials erforderlich ist, da diese über einen längeren Zeitraum in vivo nachlassen kann.

4. WARNHINWEISE

SABAsilk® ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Nadeln dürfen keinesfalls resterilisiert werden. Die erneute Verwendung kann zu schweren, unter Umständen sogar tödlichen Infektionen des Patienten führen. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen übernimmt der Hersteller hierfür keine Verantwortung. SABAsilk® darf nicht verwendet werden, • wenn das Verfallsdatum überschritten ist, • die Sterilverpackung beschädigt ist oder • Zweifel an ihrer Unversehrtheit bestehen. SABAsilk® darf nur von Ärzten angewendet werden, die mit der Anwendung von nicht-resorbierbarem Nahtmaterial vertraut sind, da das Risiko einer Wunddehiszenz vom Anwendungs­ort und vom verwendeten Nahtmaterial abhängt. Dabei ist das Materialverhalten im Gewebe zu beachten (siehe oben). Darüber hinaus muss der Operateur auch über ausreichende Kenntnisse über das notwendige Handling (z.B. Knoten­techniken) verfügen. Der Operateur ist für Komplikationen verantwortlich, die sich aus einer fehlerhaften Indikation, einer unzureichenden Operationstechnik oder einem aseptischen Fehler ergeben. In allen Fällen wird empfohlen, den Eingriff durch entsprechende Nachsorgemaßnahmen zu begleiten. Wie jeder Fremdkörper kann ein längerer Kontakt mit Salzlösungen, wie sie etwa im Harn- und Gallentrakt vorkommen, zur Bildung von Konkrementen führen. Wie bei jedem anderen Nahtmaterial ist auch bei SABAsilk® darauf zu achten, dass es nicht durch falsche Handhabung beschädigt wird. So hinterlässt das Fassen mit einem Nadelhalter oder einer Klemme deutliche Spuren am Faden. Diese Schädigungen nehmen großen Einfluss auf die Reißfestigkeit eines Fadens. Auch die Handhabung der Nadel darf nur mit angemessener Vorsicht erfolgen. Die Nadel sollte immer am Anfang des letzten Drittels gefasst werden. Das Fassen der Nadel im Nadelspitzenbereich kann die Penetrationswirkung beeinträchtigen

SABAsilk®

SABANA®
MEDIZINBEDARF

Sabana Medizinbedarf GmbH
Alwinenstraße 2
65189 Wiesbaden/Germany
www.sabana.de

und zum Bruch der Nadel führen. Gleiches gilt für das Fassen der Nadel am armierten Ende. Vorsicht auch vor Nadelstichverletzungen! Gebrauchte Nadeln sind sofort nach der Benutzung in einen geeigneten durchsichtigen Behälter zu entsorgen.

5. NEBENWIRKUNGEN

Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von SABAsilk® können in Form allergischer Reaktionen bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegenüber Seide, als anfängliche entzündliche Gewebereaktion oder als vorübergehende Irritation in der Wundregion auftreten. Wie alle Fremdkörper kann das Nahtmaterial eine vorhandene Infektion verstärken.

6. STERILITÄT

SABAsilk® Nadel-Faden-Kombinationen sind mit Ethylenoxid sterilisiert. Es ist nicht zulässig, SABAsilk® zu resterilisieren! Das Produkt darf keinesfalls verwendet werden, wenn die Sterilverpackung beschädigt oder geöffnet ist. Geöffnete, nicht benutzte Produkte unbedingt entsorgen.

7. LAGERBEDINGUNGEN

SABAsilk® darf nur unter normalen Umgebungsbedingungen und geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Hitzeeinwirkung gelagert werden. Nur in der Originalverpackung aufbewahren. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

8. KENNZEICHNUNGSSYMBOL

	Name und Anschrift des Herstellers
	gefärbtes, geflochtenes und nicht-resorbierbares Nahtmaterial
	ungefärbtes, geflochtenes und nicht-resorbierbares Nahtmaterial
	gefärbtes, geflochtenes, beschichtetes und nicht-resorbierbares Nahtmaterial
	ungefärbtes, geflochtenes, beschichtetes und nicht-resorbierbares Nahtmaterial
	Chargenbezeichnung
	Sterilisiert mit Ethylenoxid
	Nicht zur Wiederverwendung
	Nicht erneut sterilisieren
	Gebrauchsanweisung beachten
	Verwendbar bis (Jahr-Monat)
	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
	Obere Temperaturbegrenzung für die Lagerung
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden

CE 0123 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

F **Mode d’emploi**
Matériel de suture chirurgical stérile non-résorbable
Combinaison aiguille-fil en soi

1. DESCRIPTION

SABAsilk® est un matériel de suture chirurgical stérile tressé non-résorbable, composé de la protéine organique fibroïne, obtenue à partir du cocon du ver à soie. Ces fils de cocon extrêmement fins sont nettoyés, filés et tressés avec précision. Pour améliorer ses propriétés de maniement et pour éviter la capillarité, ce matériel de suture peut être enduit. Il se distingue par une grande souplesse et une bonne résistance à la rupture

Le matériel de suture SABAsilk® est disponible en blanc sans colorant ou teinté en noir ou bleu avec un colorant inoffensif au niveau physiologique. Il est disponible dans différents grosseurs et longueurs de fil avec des aiguilles chirurgicales fixement armées de types et de diamètres différents. L’emballage de SABAsilk® est bleu clair. SABAsilk® remplit les exigences sévères de la pharmacopée européenne et de la directive CE 93/42/CEE concernant les dispositifs médicaux.

2. DOMAINES D’UTILISATION

SABAsilk® est prévu pour l’adaptation ou la ligature des bords de plaies.

UTILISATION

Le matériel de suture à utiliser doit être choisi en fonction de l’état du patient et de la taille de la plaie.

COMPORTEMENT DU MATERIAU

Le matériel de suture en soie déclenche une réaction initiale minime d’inflammation du tissu, suivie d’un enrobage progressif par du tissu conjonctif fibreux. Bien que la soie ne soit pas résorbable, la dégradation graduelle des fibres de soie protéiniques in vivo peut entraîner une diminution progressive de la résistance à la rupture.

3. CONTRE-INDICATIONS

SABAsilk® n’est pas fait pour une utilisation sur le cœur, sur l’appareil circulatoire central et sur le système nerveux central. Il ne faut pas l’utiliser lorsque le maintien de la résistance à la rupture du matériel de suture est nécessaire, étant donné que cette résistance peut faiblir au bout d’une période de temps assez longue in vivo.

4. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES

SABAsilk® est destiné à un usage unique. Il ne faut jamais restériliser les aiguilles. Une utilisation renouvelée peut entraîner de graves infections du patient, voire des infections mortelles. Conformément aux dispositions légales, le fabricant décline toute responsabilité à cet égard.

Il ne faut pas utiliser SABApol®

- quand la date de péremption est dépassée
 - quand l’emballage stérile est endommagé ou
 - s’il y a des doutes quant à l’intégralité de l’emballage.
- SABAsilk® ne peut être utilisé que par des médecins qui connaissent bien l’utilisation de matériel de suture non-résorbable, puisque le risque de déhiscence de plaie dépend de l’endroit de l’utilisation et du matériel de suture utilisé. En même temps, il faut tenir compte du comportement du matériau dans le tissu (cf. plus haut). En outre, le chirurgien doit disposer de connaissances suffisantes sur la manipulation nécessaire (p.ex. techniques de nœuds). Le chirurgien est responsable des complications résultant d’une indication erronée, d’une technique opératoire insuffisante ou d’une erreur stérile. En tous cas, on recommande d’accompagner l’opération de mesures de suivi correspondantes. Comme tout corps étranger, un contact prolongé avec des solutions salées – comme c’est le cas dans les voies urinaires et les voies biliaires, peut entraîner la formation de concrétions.

Dans l’utilisation de SABAsilk® comme dans l’utilisation de tout autre matériel de suture, il faut également veiller à ne pas endommager le matériel par fausse manipulation. La saisie du fil avec un porte-aiguille ou une pince laisse des traces distinctes sur le fil. Ces dégradations ont une grande influence sur la résistance d’un fil à la rupture. Il faut également manier l’aiguille avec une précaution adéquate. C’est toujours uniquement au début du dernier tiers qu’il faut tenir l’aiguille. Quand on tient l’aiguille dans la zone de la pointe, cela peut altérer l’effet de pénétration et entraîner la rupture de l’aiguille. La même chose vaut pour la saisie de l’aiguille par le bout armé. Attention également aux blessures par piqûres d’aiguille! Après utilisation, il faut immédiatement éliminer les aiguilles usagées dans des contenants spéciaux destinées à recevoir des aiguilles et des objets pointus et tranchants.

5. EFFETS SECONDAIRES

Dans l’utilisation de SABAsilk® des effets secondaires non souhaités peuvent survenir sous forme de réactions allergiques chez les patients présentant une hypersensibilité à la soie, comme réaction initiale du tissu avec inflammation ou comme irritation passagère dans la région de la plaie. Comme tous les corps étranger, le matériel de suture peut aggraver une infection existante.















6. STÉRILITÉ

Les combinaisons d’aiguille et de fil SABAsilk® sont stérilisées à l’oxyde d’éthylène. Il est interdit de restériliser SABAsilk®! Le produit ne peut en aucun cas être utilisé si l’emballage stérile est endommagé ou ouvert. Il faut absolument éliminer les produits ouverts non utilisés.

7. CONDITIONS DE STOCKAGE

Il faut stocker SABAsilk® dans des conditions ambiantes normales et à l’abri de l’humidité et de l’effet direct de la chaleur. A conserver uniquement dans l’emballage original. Ne plus utiliser après expiration de la date de péremption.

8. SYMBOLES DE MARQUAGE

	nom et adresse du fabricant
	matériel de suture teint, tressé et non-résorbable
	matériel de suture non-teint, tressé et non-résorbable
	matériel de suture teint, tressé, enduit et non-résorbable
	matériel de suture non-teint, tressé, enduit et non-résorbable
	désignation du lot
	stérilisé à l’oxyde d’éthylène
	ne pas réutiliser
	ne pas stériliser à nouveau
	tenir compte du mode d’emploi
	à utiliser d’ici (année-mois)
	conserver à l’abri de la lumière du soleil
	température maximale de stockage
	ne pas utiliser en cas d’emballage endommagé

CE 0123 marquage CE avec numéro d’identification du service accrédité

Instructions for use

Sterile, non-absorbable surgical suture material
Needle-suture combination made of silk

1. DESCRIPTION

SABAsilk® is a non-absorbable, sterile, woven surgical suture material consisting of the organic protein fibroin, extracted from the cocoons of silkworms. These extremely fine cocoon threads are cleaned, spun and precision-woven. This suture material can be coated to improve handling properties and to reduce capillarity. Its outstanding features include high flexibility and good tensile strength. SABAsilk® suture material is available undyed in white or dyed black or blue with physiologically safe dye. It is available in different sizes and lengths with swaged surgical needles of various types and diameters. The packaging of SABAsilk® is marked in light blue. SABAsilk® meets the strict requirements of the European Pharmacopoeia and the EC Directive 93/42/EEC on medical devices.

2. AREAS OF APPLICATION

SABAsilk® is used for the adaptation of wound edges and/or ligature

APPLICATION

The suture material to be used must be selected based on the condition of the patient and the size of the wound.

MATERIAL BEHAVIOR

Silk suture material triggers an initial minimally inflammatory tissue response, followed by incremental envelopment in fibrous connective tissue. Although the silk is not absorbable, its progressive degradation of the proteinaceous silk fibers in vivo can lead to a gradual decrease in stability.

3. CONTRAINDICATIONS

SABAsilk® is not intended for use in the heart, the central cardiovascular system or the central nervous system. It should not be used when preservation of the stability of the suture material is required, as this can deteriorate over a longer period in vivo.

4. WARNINGS

SABAsilk® is intended for single use only. The needles may not be resterilized under any circumstances. Re-use can lead to severe and possibly fatal infections in patients. In accordance with statutory provisions, the manufacturer is not liable for this. SABAsilk® may not be used

- if the expiration date is in the past,
- the sterile packaging is damaged or
- if there is doubt as to whether it is intact.

SABAsilk® may be used only by physicians who are familiar with the use of non-absorbable suture material, as the risk of wound dehiscence depends on the site where the sutures are used and on the suture material used. The material behavior in the tissue must be considered thereby (see above). In addition, the surgeon must have sufficient knowledge of the handling required (e.g. knotting techniques). The surgeon is responsible for complications resulting from an incorrect indication, inadequate surgical techniques or an aseptic error. In all cases it is recommended that the surgery be accompanied by corresponding after-care measures. Like any foreign body, longer contact with saline solutions such as those in the urinary and biliary tracts, can result in the formation of concretions.

As with any other suture material, care must be taken with SABAsilk® to ensure that it is not damaged by incorrect handling. Thus, gripping it with a needle holder or a clamp leaves clear marks on the suture. Such damage has a strong influence on the stability of a suture. The needle must also be handled with the appropriate care. The needle should always be grasped at the beginning of the last third. Grasping the needle at its point can impair penetration and result in breakage of the needle. The same applies to grasping the needle at the swaged end. Caution must also be exercised with regard to puncture injuries from needles. Used needles must be disposed of in a suitable puncture-proof container immediately after use.

5. SIDE EFFECTS

Adverse side effects from the use of SABAsilk® can consist of allergic reactions in patients with sensitivities to silk, as an initial inflammatory tissue response or a temporary irritation in the area of the wound. Like all foreign bodies, the suture material can aggravate an existing infection.















6. STERILITY

SABAsilk® needle and suture combinations are sterilized with ethylene oxide. Resterilization of SABApol® is prohibited! The product must not be used if the sterile packaging is damaged or open. Always dispose of opened, unused products.

7. STORAGE CONDITIONS

SABAsilk® must be stored only in normal environmental conditions and protected from moisture and direct exposure to heat. Store only in the original packaging! Do not use this product after the expiration date!

8. LABELING SYMBOLS

	Manufacturer’s name and address
	Dyed, woven and non-absorbable suture material
	Undyed, woven and non-absorbable suture material
	Dyed, woven, coated and non-absorbable suture material
	Undyed, woven, coated and non-absorbable suture material
	Batch designation
	Sterilized with ethylene oxide
	Do not re-use.
	Do not resterilize.
	Comply with the instructions for use.
	Usable until (year-month)
	Store in a dark location away from sunlight.
	Upper temperature limit for storage
	Do not use if the packaging is damaged.

CE 0123 CE mark with code number of the Notified Body

Használati utasítás

Steril nem felszívódó sebészeti varróranyag
Tű-fonal kombináció selyemből

1. TERMÉKLEÍRÁS

A SABAsilk® nem felszívódó, steril, fonott sebészeti varróranyag. Alapanyaga a fibroin, egy szerves fehérje, melyet a selyemlepke hernyójának gubójából nyernek. A leheletvékony gubószálakat meg tisztítják, összeszorják és összefonják. Az így keletkező varróranyagot a kezelési tulajdonságok javítása vagy a hajszálcsőesség csökkentése érdekében el lehet látni bevonattal is. Kiváló rugalmasság és magas szakítószilárdság jellemzi. A SABAsilk® varróranyagot fehér színben, színezék nélkül vagy fiziológiailag ártalmatlan fekete vagy kék színezékanyaggal színezett kiszerezésben kapható. Különböző fonalvastagságban és -hosszban, valamint különböző típusú és átmérőjű, fixen a fonalhoz csatlakozó sebészeti tűvel felszerelve kerül forgalomba. A SABAsilk® csomagolása világoskék jelölést visel. A SABAsilk® megfelel az Európai Gyógyszerkönyv és az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv szigorú követelményeinek.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A SABAsilk® lágy szövetek egyesítésére és/vagy lekötésére alkalmas.

ALKALMAZÁS

A alkalmazott varróranyag kiválasztásakor a beteg állapotát és a seb méretét kell figyelembe venni.

ANYAGVISELKEDÉS

A selyem alapú varróranyag kezdetben minimális gyulladásos szövetreakciót idéz elő, amit a varróranyag fokozatos

kötőszövetes betokozódása kísér. Bár a selyem nem szívódik fel, a fehérjealapú selyemszálak egyre erősödő degradációja in vivo a szakítószilárdság fokozatos csökkenésével járhat.

3. ELLENJAVALLATOK

A SABAsilk® nem alkalmazható a szíven, a központi keringési rendszeren és a központi idegrendszerben végzett beavatkozások során.

Mivel hosszabb idő elteltével szakítószilárdsága in vivo csökkenhet, alkalmazása ellenjavallt minden olyan esetben, ahol a varróranyag szakítószilárdsága változatlan kell legyen.

4. FIGYELMEZTETÉSEK

A SABAsilk® egyszeri használatra szánt termék. A tüket tilos újraszterilizálni. Ezek újrafelhasználása súlyos, egyes esetekben akár halálos fertőzést is eredményezhet a betegben. A törvényes rendelkezések értelmében a gyártó ilyen esetekben nem vállal felelősséget. A SABAsilk® nem alkalmazható, ha

- lejárt a felhasználási ideje,
- nem ép a steril csomagolás vagy
- kétség merül fel a csomagolás sértetlenségét illetően.

A SABAsilk®-et csak a nem felszívódó varróranyagok alkalmazásában jártas orvosok használhatják, mert a varratelétlenség kockázatának fellelése az alkalmazás helyétől és az alkalmazásra kerülő varróranyagtól függ. Ezt illetően ügyelni kell az anyag szövetben való viselkedésére (lásd fent). A sebésznek emellett megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a sebészeti eljárások terén (pl. csomózási technikák). A helytelen indikációból, a nem megfelelő sebészeti technika alkalmazásából és az aszepszist gátló hibákból eredő szövődményekért a sebész a felelős. Minden egyes beavatkozás után tanácsos megfelelő utógondozásban részesíteni a beteget.

A varrórfonalak tartós érintkezése idegen anyaggal, így a húgyutak és az epeutak területén előforduló sóoldatokkal is, kóképződéshez vezethet.

Mint minden egyéb varróranyagnál, úgy a SABAsilk® esetén is ügyelni kell arra, hogy az anyag ne károsodjon helytelen kezelés következtében. Ha a tűfogó vagy a csipesz érintkezik a fonallal, maradandó nyomot hagy hátra. Ezek a károsodások jelentősen befolyásolják a fonal szakítószilárdságát.

A tűt is csak kellő óvatosság mellett szabad alkalmazni, és mindig az utolsó harmad kezdeténél kell megfogni. A tühegy területének megragadása a penetrációs képesség csökkenését és a tű eltörését eredményezheti. Ugyanez történhet a tű fonalhoz csatlakozó végének megragadásakor is. Óvatosan kell eljárni a tűszúrás okozta sérülések elkerülése érdekében is. A használt tűt az alkalmazást követően haladéktalanul egy erre a célra alkalmas szűrőbiztos tartályba kell bedobni.

5. MELLÉKHATÁSOK

A SABAsilk® alkalmazása során fellépő nemkívánatos mellékhatások a következők lehetnek: allergiás reakciók a selyemmel szemben túlérzékenységet mutató betegeknél, kezdeti gyulladásos szövetreakció, a sebkörnyék átmeneti irritációja. Mint minden idegen test, így a varróranyag is súlyosbíthatja a már fennálló fertőzéseket.

6. STERILITÁS

A SABAsilk® tű-fonal kombináció sterilizálása etilén-oxiddal történik. A SABAsilk® újraszterilizálása tilos. Ha a steril csomagolás nem ép vagy nyitva van, a terméket nem szabad alkalmazni. A nyitott állapotú, fel nem használt terméket mindenképpen ki kell dobni.

7. TÁROLÁSI FELTÉTELEK

A SABAsilk® csakis normál környezeti feltételek mellett, nedvességtől és közvetlen hőhatástól védve tárolandó. Kizárólag az eredeti csomagolásban tartandó. A felhasználhatósági idő lejártá után nem szabad alkalmazni.

8. A CSOMAGOLÁSON HASZNÁLT JEJELŐSÉ

	A gyártó neve és címe
	színezett, fonott és nem felszívódó varróranyag
	színezetlen, fonott és nem felszívódó varróranyag
	színezett, fonott, bevonatos és nem felszívódó varróranyag
	színezetlen, fonott, bevonatos és nem felszívódó varróranyag
	Gyártási szám
	Etilén-oxiddal sterilizálva
	Egyszer használatos
	Nem szabad újraszterilizálni
	Vegye figyelembe a használati utasítást.
	Felhasználható: (év-hónap)
	Napfénytől védve tartandó.
	Maximális tárolási hőmérséklet
	Nem szabad alkalmazni, ha a csomagolás nem ép.

CE 0123 CE-jelölés bevizsgálóhely azonosító számával

Materiale di sutura chirurgico sterile non riassorbibile
Combinazione ago-filo in seta

SABASilk® è un materiale di sutura chirurgico non riassorbibile sterile intrecciato, composto di proteina organica denominata fibroina, ottenuta dal bozzolo del baco da seta. Questi finissimi fili di bozzolo sono puliti, filati e intrecciati con estrema precisione. Per migliorare le caratteristiche di manipolazione e ridurre la capillarità, è possibile ottenere questo materiale di sutura con un rivestimento che si distingue per un'elevata elasticità e una buona resistenza allo strappo.

2. CAMPO DI IMPIEGO

IMPIEGO

COMPORTAMENTO DEL MATERIALE

3. CONTROINDICAZIONI

Non andrebbe impiegato quando sia necessario conservare la resistenza allo strappo del materiale di sutura, potendo questa attenuarsi in vivo su un prolungato arco di tempo.

4. AVVERTENZE

SABAsilk® non deve essere utilizzato quando:

- SABASIL[®] può essere impiegato solo da medici che hanno confidenza con l'utilizzo di materiale di sutura non riassorbibile, in quanto il rischio di una deiscenza della ferita dipende dal punto di applicazione e dal materiale di sutura utilizzato. A questo riguardo, si faccia attenzione al comportamento del materiale nel tessuto (vedi sopra). Oltre a ciò, l'operatore deve anche disporre di sufficienti conoscenze in merito al trattamento necessario (le tecniche dei nodi, per esempio). L'operatore è responsabile di complicazioni risultanti da un'errata indicazione, una insufficiente tecnica operatoria o un errore estetico. Si raccomanda in tutti i casi di accompagnare l'intervento con una corrispondente assistenza post-operatoria.

Attenzione anche a non ferirsi pungendosi con l'ago! Gli aghi usati vanno subito smaltiti dopo l'uso in un opportuno contenitore non perforabile.

5. EFFETTI COLLATERALI






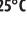






6. STERILITÀ

Non è consentito risterilizzare SABAsilk®!

7. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Non utilizzare più superata la data di scadenza.

8. SIMBOLI IDENTIFICATIVI

- | | |
|---|--|
|  | Nome e indirizzo del produttore |
|  | Materiale di sutura colorato intrecciato e non riassorbibile |
|  | Materiale di sutura non colorato intrecciato e non riassorbibile |
|  | Materiale di sutura colorato intrecciato rivestito e non riassorbibile |
|  | Materiale di sutura non colorato intrecciato rivestito e non riassorbibile |
|  | Identificazione del lotto |
|  | Sterilizzato con ossido di etilene |
|  | Da non riutilizzare |
|  | Da non sterilizzare di nuovo |
|  | Osservare la guida all'uso |
|  | Utilizzabile entro (anno-mese) |
|  | Conservare al riparo dalla luce solare |
|  | Limite massimo di temperatura per la conservazione |
|  | Non utilizzare in caso di confezione danneggiata |
|  | Marchio CE con numero identificativo dell'Organismo Notificato |